



Vinkelrigle/ Vinkelfeste/ Vinkelreglage/ Sliding bolt - VELA Tango

Montering af vinkelrigle

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)923319 Vinkelrigle


(A)101056 Monteringskit CY-ryg

(A)101066 Monteringskit CY-ryg Medical

(A)101063 Monteringskit VELA Tango 500



Videoinstruktion:
vl1935.dk/105916

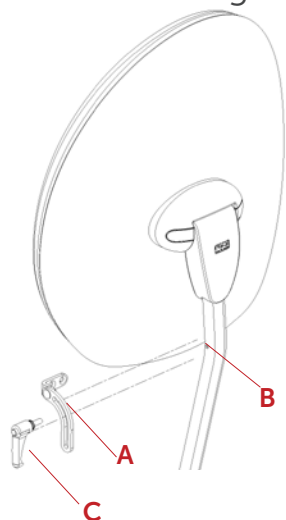


DANSK

1. Vinkelriglen (A) skrues fast på rygbøjlen (B) med det lille vinkelgreb (C). Placer vinkelriglen ind mod ryggen (D) og mærk op på ryggen med en tusch gennem de to huller i beslaget.
2. Placer nu vinkelriglen på ryggen, som vist (E). Rygbøjlen vipkes lidt ud, så man kan komme til at skru vinkelriglen fast på ryggen med de to medsendte træskruer (F).
3. Herefter monteres vinkelriglen igen på rygbøjlen med det lille vinkelgreb. Juster ryggenes hældning og spænd vinkelgrebet godt.

NORSK

1. Vinkelfestet (A) skrues fast på rygbøylene (B) med det lille vinkelhåndtaget (C). Plasser vinkelfestet inn mot ryggen (D), og merk ryggen med en tusj gjennom de to hullene i beslaget.
2. Plasser deretter vinkelfestet på ryggen som vist (E). Rygbøylene vipkes litt ut, slik at man kommer til for å skru fast vinkelfestet på ryggen med de to medfølgende treskruene (F).
3. Deretter monteres vinkelfestet på rygbøylene igjen med det lille vinkelhåndtaget. Juster rygvinkelen og stram vinkelhåndtaget godt.

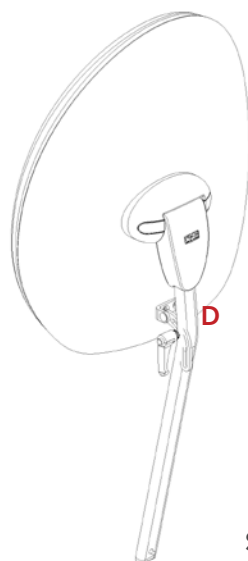

SVENSKA

1. Skruva fast vinkelreglaget (A) på ryggstödsfästet (B) med det lilla vinkelhandtaget (C). Placera vinkelhandtaget in mot ryggen (D) och använd en tuschpenna för att markera hålens placering genom de två hålen i beslaget.
2. Placera vinkelreglaget på ryggen som bilden visar (E). Vinkla ryggstödsfästet något utåt så att det går att komma åt att skruva fast vinkelreglaget på ryggen med de två medföljande träskruvarna (F).
3. Montera sedan vinkelreglaget på ryggstödsfästet igen med det lilla vinkelhandtaget. Justera ryggstödet position och dra åt vinkelhandtaget ordentligt.

ENGLISH

1. Screw the sliding bolt (A) in place on the backrest arm (B) with the small sliding handle (C). Position the sliding bolt in against the back (D) and mark the back with a marker through the two holes in the fitting.
2. Next, place the sliding bolt on the back as shown (E). Tilt the backrest arm out a bit so that you can screw the sliding bolt to the back with the two enclosed wooden screws (F).
3. Next, re-attach the sliding bolt to the backrest arm with the small sliding handle. Adjust the incline and tighten up the sliding handle.