

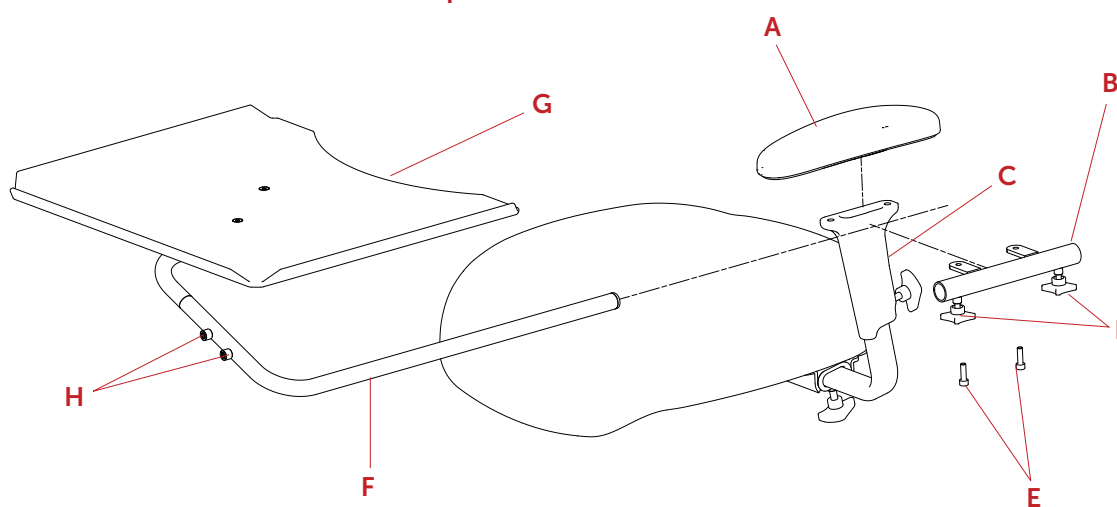


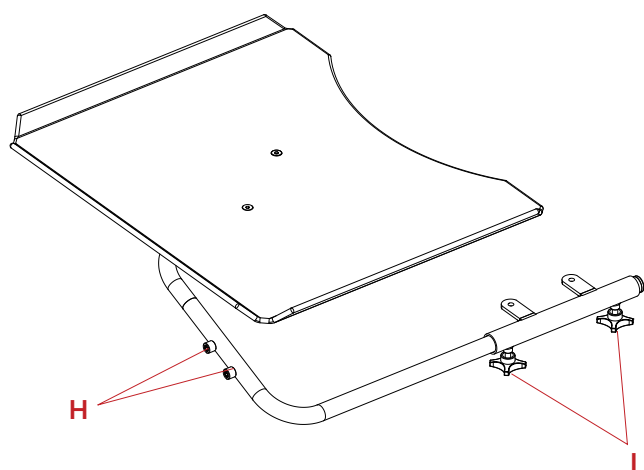

Akrylbord / Acrylic table - VELA Tango 700/700E

Montagevejledning for akrylbord på VELA Tango 700/700E

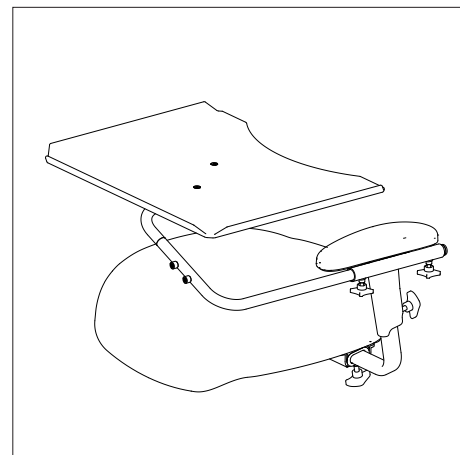

DANSK

1. Skru armlænsputen (A) af og placér monteringsrøret (B) mellem armlænsstangen (C) og armlænsputen (A) - spænd det hele godt fast med de medsendte skruer (E).
2. Sæt stangen fra bordpladen (F) i monteringsrøret (B).
3. Placér bordet (G) i den ønskede afstand og spænd de to håndskruer (I) godt.
4. Bordpladen (G) kan yderligere justeres ved at løsne de 2 pinolskruer (H) på stangen til bordpladen (F).

Bemærk: Passer ikke på 9x30 cm armlænsputede!



Akrylbord / Acrylic table - VELA Tango 700/700E

Montagevejledning for akrylbord på VELA Tango 700/700E

NORSK

1. Skru armlensputen (A) av og monter monteringsrøret (B) mellom armlensstangen (C) og armlensputen (A) - spenn det hele godt fast med de medsendte skruer (E).
2. Sett stangen fra bordplaten (F) i monteringsrøret (B).
3. Monter bordet (G) i den ønskede avstand og spenn de to håndskruer (I) godt.
4. Bordplaten (G) kan ytterligere justeres ved å løsne de 2 settskruer (H) på stangen til bordplaten (F).

Merk: Passer ikke til 9x30 cm armlenspute!

SVENSKA

1. Skruva loss armstödet (A) och placera monteringsröret (B) mellan armstödet (C) och armstödet (A) - dra åt det hela med de medföljande skruvarna (E).
2. För in stangen från bänkskivan (F) i monteringsröret (B).
3. Placera bordet (G) på önskat avstånd och dra åt de två handskruvarna (I).
4. Bordsskivan (G) kan justeras ytterligare genom att lossa de 2 nålhålen (H) på bordsskivstangen (F).

Observera: Passar inte till 9x30 cm armstöds kudde!

ENGLISH

1. Dismount the armrest pillow (A) and place the mount pipe (B) between the armrest rod (C) and the armrest pillow (D) - tighten it all together with the supplied screws (E).
2. Mount the rod from the table (F) into the mount pipe (B).
3. Put the table (G) in the desired distance and tighten the two handscrews (I) well.
4. The table (G) can be adjusted by loosening the two pinolscrews (H) on the rod from the table (F).

Note: Does not fit 9x30 cm armrest pad!