



Comfortsæde / Comfortsete / Comfortsits / Comfort seat - VELA Meywalk 4

Montering af comfortsæde på /Guide to comfort seat on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M011334 Comfort sadel inkl beslag



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey16




A




B



C

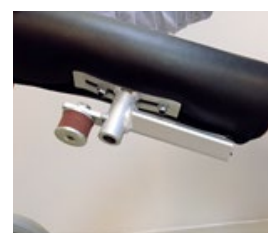

D

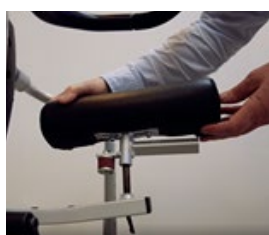

E



F



G



H

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Afmonter skruen under sædebøjlen og tag gangvognens originale sæde af (A)
3. Afmonter gummibøsning fra gangvognens originale sæde med en gaffelnøgle (B)
4. Monter gummibøsning på comfortsædet (C,D)
5. Sæt komfortsædet på sædeopstanderen på gangvognen (E)
6. Fastgør comfortsædet med en skrue under sædebøjlen som tidligere (F)
7. Afmonter rumpestoppet fra gangvognens originale sæde ved at fjerne skruen i det bagerste beslag (G)
8. Monter rumpestoppet på comfortsædet ved at stikke det ind i beslaget under comfortsædet og fastgøre det med en skrue (H)



Comfortsæde / Comfortsete / Comfortsits / Comfort seat - VELA Meywalk 4

Montering af comfortsæde på /Guide to comfort seat on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Fjern skruen under setebøylene og ta av gåvognens originale sete (A)
3. Fjern gummipakningen fra gåvognens originale sete med en fastnøkkel (B)
4. Monter gummipakningen på komfortsetet (C,D)
5. Sett komfortsetet på setestangen på gåvognen (E)
6. Fest komfortsetet med en skrue under setebøylene som tidligere (F)
7. Demonter rumpekanten fra gåvognens originale sete ved å fjerne skruen på det bakerste beslaget (G)
8. Monter rumpekanten på komfortsetet ved å stikke det inn i beslaget under komfortsetet og feste det med en skrue (H)

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Ta bort skruen under sittstangen och ta av originalsätet (A)
3. Ta bort gummibussningen från gåstolens originalsäte med en käftnyckel (B)
4. Montera fast gummibussningen på komfortsätet (C, D)
5. Montera komfortsätet på gåstolens säteshållare (E)
6. Montera fast komfortsätet med hjälp av en skruv under sätesfästet precis som tidigare (F)
7. Ta av bakstoppet från gåstolens originalsäte genom att ta bort skruen i det bakre fästet (G)
8. Montera fast bakstoppet på komfortsätet genom att placera fästet under komfortsätet och skruva åt det med en skruv (H)

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Remove the screw below the seat bracket and remove the original seat of the gait trainer (A)
3. Remove the rubber bushing from the gait trainer's original seat with a jaw spanner (B)
4. Mount the rubber bushing on the comfort seat (C,D)
5. Mount the comfort seat on the seat rebel of the gait trainer (E)
6. Lock the comfort seat to the gait trainer with a screw in the seat bracket (F)
7. Remove the rear stop from the gait trainers' original seat by removing the screw in the basket (G)
8. Mount the rear stop to the comfort seat by inserting it into the bracket below the comfort seat and tighten it with a screw (H)