



Sejlsæde / Seilsete / hängsits / Sling seat - VELA Meywalk 4

Montering af sejlsæde på/Guide to mount sling seat on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M011805 Til Micro & Small


M011800 Til Medium & Large



A



B

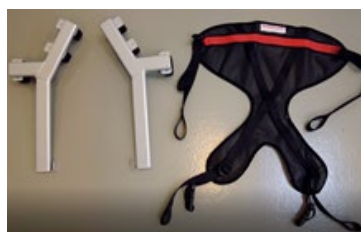

C



D



E



F



G



H



I



J



K



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey21

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Fjern den nederste håndskruer i gangvognens centerboks. Tryk håndskruen ind og drej den indtil den kan tages ud (A)
3. Fjern sædebøjlen ved at trække den ud af centerboksen nedefra (B)
4. Herefter skal de to arme til sejlsædet monteres på inder-siden af stellet på gangvognen (C,D)
5. Løsn skruerne i beslagene på bagsiden af armene til sejlsædet, så beslagene kan adskilles (E)
6. Fastgør armene til sejlsædet på indersiden af stellet på gangvognen og monter dem ved at skrue beslagene sammen rundt om stellet (F)
7. åbn spænderne på sejlsædet og træk stroppen lidt ud (G)
8. Monter stroppen på gangvognens øverste ramme ved at klikke spændet sammen omkring rammen. Der skal sidde en strop på hver side af den midterste opstander på gangvognen. (H,I)
9. De to øvrige stropper på sejlsædet fastgøres på armene, der er skruet på stellet på gangvognen ved at køre det lille øje i enden af stroppen ind over armen (J,K)
10. Sejlsædet strammes op ved at hive i stropperne under sejlsædet (K)



Sejlsæde / Seilsete / hängsits / Sling seat - VELA Meywalk 4

Montering af sejlsæde på/Guide to mount sling seat on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Fjern den nederste håndskruen i gåvognens midtre boks. Trykk inn håndskruen og dreii den til den kan tas ut (A)
3. Fjern setebøylen ved å trekke den ut av den midtre boksen nedenfra (B)
4. Så skal de to armene på seilsetet monteres på innsiden av rammen på gåvognen (C,D)
5. Løsne skruene i beslagene på baksiden av armene på seilsetet, slik at beslagene kan tas fra hverandre (E)
6. Fest armene på seilsetet til innsiden av rammen på gåvognen og monter dem ved å skru beslagene sammen rundt rammen (F)
7. Åpne spennene på seilsetet og trekk stroppen litt utover (G)
8. Monter stroppen på gåvognens øverste ramme ved å klikke spennet sammen rundt rammen. Det skal være en stropp på hver side av den midterste stangen på gåvognen. (H,I)
9. De to øvrige stroppene på seilsetet festes på armene som er skrudd på rammen på gåvognen ved å tre det lille øyet på enden av stroppen inn over armen (J,K)
10. Seilsetet strammes ved å dra i stroppene under seilsetet (K)

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Ta bort den nedre skruen i gåstolens mittlåda. Tryck in handskruen och lossa på skruen tills den kan tas bort helt (A)
3. Ta bort sittstangen genom att dra ut den från mittlådan underifrån (B)
4. Montera sedan fast de två armarna till hängsitsen på insidan av gåstolens ram (C, D)
5. Lossa på skruvarna i fästena på baksidan av armarna till hängsitsen så att fästena kan separeras (E)
6. Sätt fast armarna till hängsitsen på insidan av gåstolens ram och montera fast dem genom att skruva åt fästena runt ramen (F)
7. Öppna spännena på hängsitsen och dra ut remmen något (G)
8. Montera remmen på gåstolens övre ram genom att klicka ihop spännet runt ramen. Montera en rem på vardera sida av stativstangen (H, I)
9. Sätt fast de övriga remmarna på hängsitsen genom att placera öglan runt armarna som är monterade på gåstolens ram (J, K)
10. Spänn åt hängsitsen genom att dra i de två remmarna under hängsitsen (K)

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Remove the hand screw in the bottom of the centerbox on the gait trainer. Press in the hand screw and turn until the hand screw can be removed (A)
3. Remove the seat hanger from the centerbox by pulling it out from below (B)
4. Now mount the two arms for the sling seat on the inner side of the frame of the gait trainer (C,D)
5. Separate the brackets on the backside of the arms for the sling seat, by loosening the screws (E)
6. Mount the two arms for the sling seat on the inner side of the frame of the gait trainer by locking the brackets around the frame and tightening the screws (F)
7. Open the buckles on the sling seat and pull out the strap a little (G)
8. Mount the strap on the upper frame of the gait trainer by locking the buckle around the frame. Mount one strap on each side of the stanchion bar (H,I)
9. Mount the two other straps of the sling seat by putting the loop around the arms mounted on the frame of the gait trainer (J,K)
10. Tighten up the sling seat by pulling the two straps under the sling seat (K)