



# Mavepude / Magepude / Magkudde / Trunk pad - VELA Meywalk 4


Montering af maveplade/Guide to mount trunk pad VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M011710 Mavepude Small

M011715 Mavepude Medium

M011720 Mavepude Large

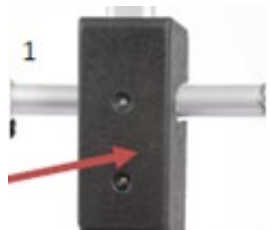


**A**



**B**



**C**

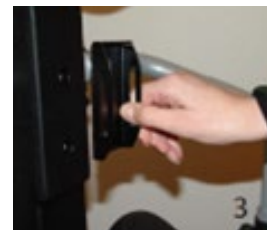


**D**



**E**




**F**

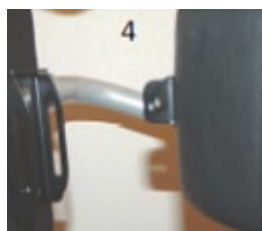

**G**



**H**

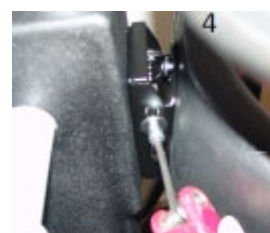

**I**



**J**



**K**

## DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Mavepuden skal monteres på den sorte centerboks. Fjern først skruerne fra centerboksen (A)
3. Fjern beslaget og skruerne som er formonteret på mavepuden (B, C)
4. Monter beslaget på den sorte centerboks med de skruer der fulgte med i posen med mavepuden. (D, E, F)
5. Monter nu mavepuden på beslaget ved at bruge skruerne og skiverne igen. (G, H, I, J, K)



## Mavepude / Magepute / Magkudde / Trunk pad - VELA Meywalk 4

### Montering af mavepude på/Guide to mount trunk pad on VELA Meywalk 4

#### NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Mageputen skal monteres på den sorte midtre boksen. Fjern først skruene fra den midtre boksen (A)
3. Fjern beslaget og skruene som er monteret fremme på mageputen (B, C)
4. Monter beslaget på den sorte midtre boksen med skruer som fulgte med i posen sammen med mageputen. (D, E, F)
5. Monter så mageputen på beslaget igjen med skruene og skivene. (G, H, I, J, K)

#### SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Montera fast magkudden på den svarta mittboxen. Ta först bort skruvarna från mittboxen (A)
3. Ta bort fästet och skruvarna som är förmonterade på magkudden (B, C)
4. Montera fästet på den svarta mittlådan med hjälp av de medföljande skruvarna i påsen med magkudden. (D, E, F)
5. Montera nu fast magkudden i fästet igen med hjälp av skruvarna och brickorna. (G, H, I, J, K)

#### ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. The Trunk Pad shall be mounted on the black polyurethane shell of the center box. First remove the screws from the shell (A)
3. Remove the bracket, and the screws, that came mounted on the Trunk Pad. (B, C)
4. Then mount the bracket on the black polyurethane shell of the center box. Use the screws that came with the Trunk Pad in a bag. (D, E, F)
5. Now mount the Trunk Pad on the bracket, using the screws and washer again. (G, H, I, J, K)