



Antitip / Antivipp / Tippstöd / Anti-tip - VELA Meywalk 4

Montering af antitip på/ Guide to mount antitip on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

011147 Til Micro, Small og Medium


011148 Til Large



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey1



A

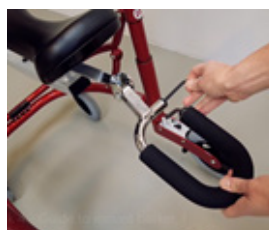

B



C



D

DANSK

1. Antitip kan monteres på indersiden eller ydersiden af de to baghjul på gangvognen.
2. Brems gangvognen.
3. Afmonter skruen i baghjulet (A) med en 6 mm unbrakonøgle, der findes i rumpestoppet (B) på gangvognen.
4. Antitip støtten sættes op imod yder- eller indersiden af gangvognens baggaffel (C), så den går i hak i de to fordybninger i baggafflen (D).
5. Skruerne skrues på igen fra hver side og efterspændes, så de sidder godt fast.



Antitip / Antivipp / Tippstöd / Anti-tip - VELA Meywalk 4

Montering af antitip på/ Guide to mount antitip on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Antivipp-mekanismen kan monteres på innsiden eller utsiden av de to bakhjulene på gåvognen.
2. Sett på bremsen på gåvognen.
3. Demonter skruen i bakhjulet (A) med en 6 mm unbrakonøkkel, som man finner i rumpekant (B) på gåvognen.
4. Antivipp-støtten settes opp mot ut- eller innsiden av gåvognens bakgaffel (C), slik at den sitter i de to fordypnin- gene i bakgaffelen (D).
5. Skruene skrues på igjen fra hver side og strammes slik at de sitter godt.

SVENSKA

1. Tippstödet kan monteras på insidan eller utsidan av gåstolens två bakhjul.
2. Bromsa gåstolen.
3. Ta bort skruen i bakhjulet (A) med en 6 mm insexnyckel som sitter på gåstolens bakstopp (B).
4. Tippstödet ska placeras mot utsidan eller insidan av stolens bakgaffel (C) så att de hakar fast i de två jacken i bakgaffeln (D).
5. Skruva fast skruvarna igen från båda sidorna och dra åt ordentligt så att de sitter fast.

ENGLISH

1. Anti-tip support can be mounted on the inside or outside of the rear wheels.
2. Brake the gait trainer.
3. Remove the bolt in the rear wheel (A) with a 6 mm Allen key located in the rear stop (B) of the gait trainer.
4. Place the anti-tip support against the outside or inside of the rear fork of gait trainer (C) so that they fall into place in the two rear fork recesses (D).
5. Screw bolts on both sides back on. Re-tighten firmly.