



Benglidestyr i metal / Metallglidskena / Metal leg guides - VELA Meywalk 4


Montering af benglidestyr i metal på/Guide to mount metal leg guides on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

013148 Til Micro
013168 Til Small
011160 Til Medium
011161 Til Large



A

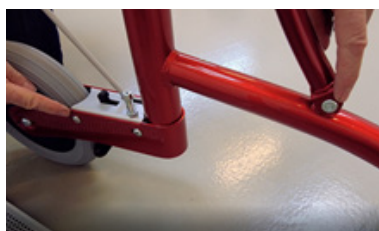

B




C



D



E

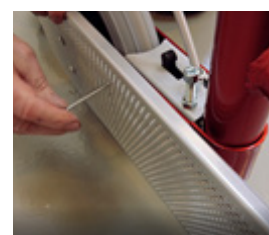

F

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Monter benglidestyr i metal på indersiden af stellet i begge sider, så de dækker for baghjulene (A)
3. Fjern de 2 skruer fra stellet (B)
4. Hold benglidestyret op mod gangvognen og fastgør den i det forreste hul med skruen (C)
5. Fastgør skruen i metalringen på bagsiden af benglidestyret (D, E)
6. Monter nu benglidestyret med skruen i det bagerste hul på gangvognen og spænd den fast med en Unbraco-nøgle (F)
7. Når benstyret er monteret korrekt vil det løfte sig op, når gangvognen passerer et dørtrin o.l.



Benglidestyret i metal / Metallglidskena / Metal leg guides - VELA Meywalk 4

Montering af benglidestyret i metal på/Guide to mount metal leg guides on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Monter benglidestyret i metall på innsiden av rammen på begge sider, slik at de dekker bakhjulene (A)
3. Fjern de 2 skruene fra rammen (B)
4. Hold benglidestyret opp mot gåvognen og fest det i det fremste hullet med skruen (C)
5. Fest skruen i metallringen på baksiden av benglidestyret (D, E)
6. Monter så benglidestyret med skruen i det bakerste hjulet på gåvognen og fest det med en unbrakonøkkel (F)
7. Når benstyret er korrekt montert vil det løfte seg opp når gåvognen passerer et dørtrinn e.l.

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Montera metallglidskenan på insidan av ramen på båda sidor så att de täcker bakhjulen helt (A)
3. Ta bort de två skruvarna från ramen (B)
4. Håll glidskenan mot stolen och montera den i framhjulet med hjälp av skruven (C)
5. Fäst skruven i metallringen på baksidan av glidskenan (D, E)
6. Montera nu fast glidskenan med hjälp av skruven i det bakre hålet på stolen och dra åt skruven med en insexnyckel (F)
7. När glidskenan är korrekt monterad bör denna lyftas när stolen passerar en tröskel eller liknande.

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Mount the metal leg guides on the inside of the frame on both sides, so they cover the rear wheels (A)
3. Remove the two screws from the frame (B)
4. Place the leg guide towards the gait trainer and lock it with the screw in the front (C)
5. Put the screw into the metal bracket on the inside of the leg guide (D, E)
6. Mount the leg guide with screw in the hole next to the rear wheel and tighten it with an allen key (F)
7. When the leg guide is mounted correctly it will slide up when the gait trainer passes a doorstep or the like.