



# Træk- og skubbestang / Trekk- og skyvestang / Tryck- och dragstång / Push and pull bar - VELA Meywalk 4

Montering af træk- og skubbestang på/Guide to mount  
push and pull bar on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

011763 Til Micro

011760 Til Small



A



B




C



D



E

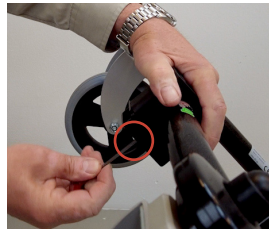

F



G



H



I



J



K



L

## DANSK

### Montering af træk- og skubbestang

1. Klik de to stænger sammen (A, B) i den ønskede længde
2. Løsn skruerne i beslaget med håndtaget på og monter det øverst på stangen med næbbet i enden med de medfølgende skruer (C,D)
3. Brems gangvognen.

### Montering af trækstang

4. Løsn skruerne i beslaget uden håndtag og fastgør det med skruerne rundt om den forreste bundramme på stellet midt på gangvognen (E)
5. Dej beslaget rundt så skruerhullet peger opad, spænd skruen der sidder nede i hullet indtil beslaget, sidder godt fast på gangvognens stel (F)

6. Tag træk- og skubbestangen frem, åben næbbet i bunden af stangen ved at trykke enderne sammen som en tøjklamme og fastgør næbbet i beslaget på gangvognen (G)
7. Skub næbbet godt ind, så det fæstner sig i den modsatte ende af beslaget (H)

### Montering af skubbestang

8. Afmonter rumpestoppet på gangvognen ved at fjerne skruen i det bagerste beslag med en Unbrakonøgle (I)
9. Indsæt det medfølgende beslag i cylinderen, hvor rumpestoppet sad og fastgør skruen i beslaget med en Unbrakonøgle (J,K)
10. Tag træk- og skubbestangen frem, åben næbbet i bunden af stangen ved at trykke enderne sammen som en tøjklamme og fastgør næbbet i beslaget på gangvognen. Skub næbbet godt ind, så det fæstner sig i den modsatte ende af beslaget (L)



# Træk- og skubbestang / Trekk- og skyvestang / Tryck- och dragstång / Push and pull bar - VELA Meywalk 4

## Montering af træk- og skubbestang på/Guide to mount push and pull bar on VELA Meywalk 4

### NORSK

#### Montering av trekk- og skyvestang

1. Klikk de to stengene sammen (A, B) i ønsket lengde
2. Løsne skruene i beslaget med håndtaket på og monter det øverst på stangen med nebbet i enden med de medfølgende skruene (C,D)
3. Sett på bremsen på gåvognen.

#### Montering av trekkstang

4. Løsne skruene i beslaget uten håndtak og fest det med skruene rundt den fremste bunnrammen på rammen midt på gåvognen (E)
5. Drei beslaget rundt slik at skruhullet peker oppover, og stram skruen som sitter nede i hullet inntil beslaget sitter godt fast på rammen på gåvognen (F)
6. Ta trekk- og skyvestangen fremover, åpne nebbet ved

stangens bunn ved å trykke endene sammen som en klesklype, og fest nebbet i beslaget på gåvognen (G)

7. Trykk nebbet godt inn slik at det fester seg i motsatt ende av beslaget (H)

#### Montering av skyvestang

8. Demonter rumpekanten på gåvognen ved å fjerne skruen i det bakerste beslaget med en unbrakonøkkel (I)
9. Sett det medfølgende beslaget i sylindren hvor rumpekanten var og fest skruen i beslaget med en unbrakonøkkel (J,K)
10. Ta trekk- og skyvestangen frem, åpne nebbet i bunnen av stangen ved å trykke endene sammen som en klesklype og fest nebbet i beslaget på gåvognen. Trykk nebbet godt inn slik at det fester seg i motsatt ende av beslaget (L)

### SVENSKA

#### Montering av tryck- och dragstång

1. Klicka ihop de två stavarna (A, B) till önskad längd
2. Lossa på skruvarna i det fästet med handtag. Använd medföljande skruvar för att montera fästet på stångens övre del med näbben i slutet (C, D).
3. Bromsa gåstolen.

#### Montering av dragstången

4. Lossa på skruvarna i det fästet utan handtag och fäst det med hjälp av skruvarna i den nedre ramen på gångstolens främre del (E)
5. Vrid fästet så att hålet pekar uppåt, dra åt skruven i hålet tills fästet sitter fast i gåstolens ram ordentligt (F)

6. Ta tag i tryck- och dragstången, öppna näbben i botten av stången genom att trycka ihop ändarna likt en klädnyppa och sätt fast näbben i fästet på gåstolen (G)

7. Tryck in näbben ordentligt så att den fastnar sitter fast i fästets motsatta ände (H)

#### Montering av tryckstången

8. Ta bort stolens bakstopp genom att ta bort skruven i det bakre fästet med hjälp av en insexnyckel (I)
9. Sätt in det medföljande fästet i cylindern där bakstoppet tidigare satt och skruva in skruven i fästet med hjälp av en insexnyckel (J, K)
10. Ta tag i tryck- och dragstången, öppna näbben i botten av stången genom att trycka ihop ändarna likt en klädnyppa och sätt fast näbben i fästet på gåstolen. Tryck in näbben ordentligt så att den fastnar i fästets motsatta ände (L)

### ENGLISH

#### Assembling the push and pull bar

1. Click the two bars together (A, B) in the length you want.
2. Loosen the screws in the bracket with the handle and mount it on the upper parts of the bar with the beak by tightening the screws (C,D)
3. Brake the gait trainer

#### Assembling the pull bar

4. Loosen the screws in the bracket without the handle and mount it on the lower frame on the front part of the gait trainer by tightening the screws (E)
5. Turn the bracket so the hole points upwards, tighten the screw in the hole until the bracket is locked to the frame of the gait trainer (F)

6. Grab the push and pull bar, open the beak in the bottom of the bar by pressing the ends together like a clothespin and lock the beak in the bracket on the gait trainer (G)

7. Press in the beak until it locks to the opposite end of the bracket (H)

#### Assembling the push bar

8. Dismount the rear stop of the gait trainer (I) by removing the screw in the bracket with an Allen Key
9. Insert the enclosed fitting in the cylinder, where the rear stop was placed and tighten the screw in the bracket with an Allen key (J,K)
10. Grab the push and pull bar, open the beak in the bottom of the bar by pressing the ends together like a clothespin and lock the beak in the bracket on the gait trainer. Press in the beak until it locks to the opposite end of the bracket (L)