




Elektrisk kip/ Elektrisk tilt/ Electrical tilt - VELA Tango 700

Montagevejledning for el-kip på VELA Tango 700

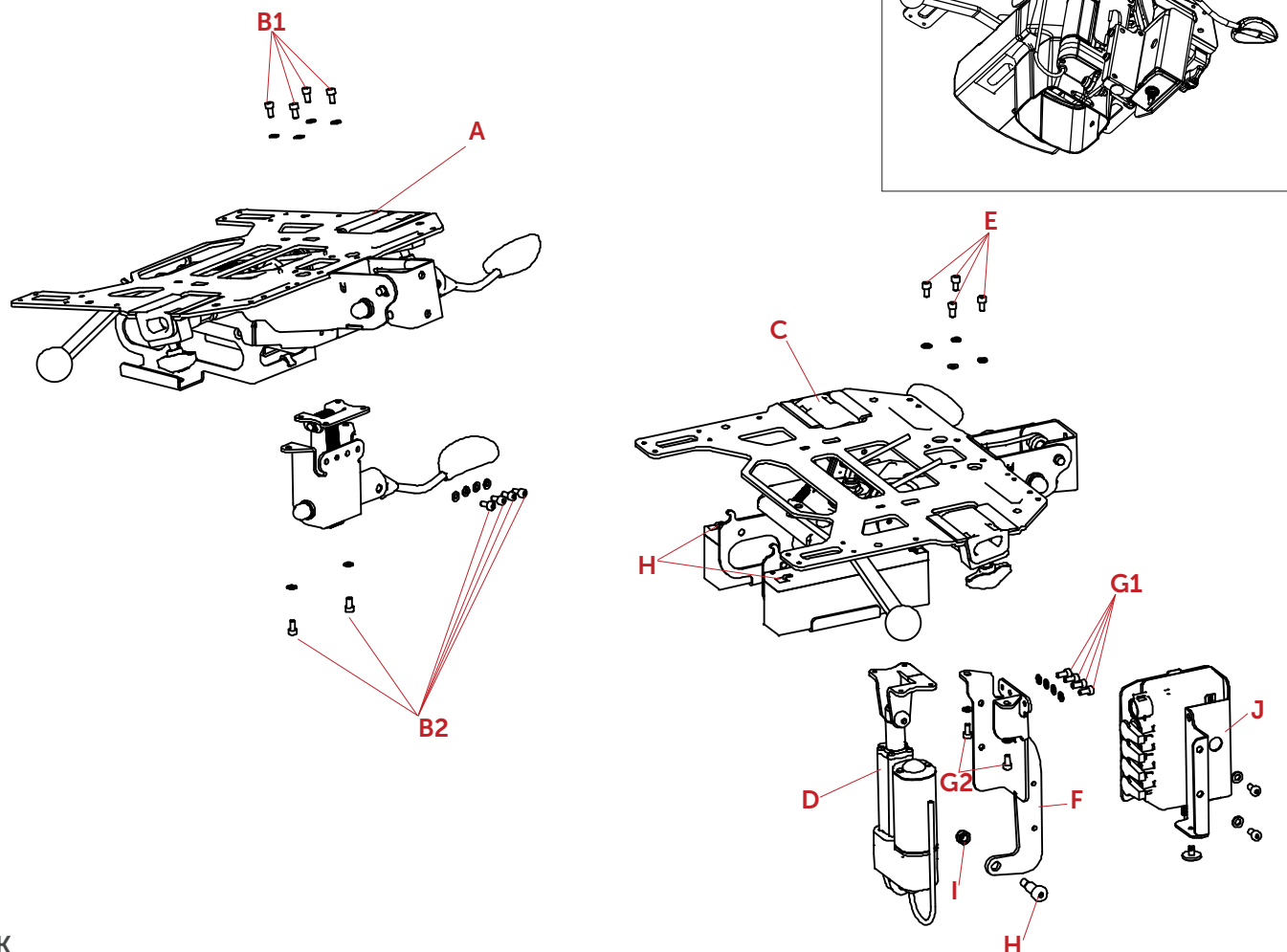

DANSK

Det anbefales at en VELA-tekniker udfører denne montage.

1. Afmonter sædet og batteriafdækninger (se vejledning 106231 + 106235).
2. Vip kippladen (A) fremad for at få mere plads bagtil.
3. Fjern eksisterende sædekip ved at fjerne de 10 skruer og skiver (B).
4. Monter topbeslaget (C) sammen med aktuatoren (D), som vist med 4 skruer og skiver (E) oppefra. Topbeslaget (C) skal vippes lidt for at få det på plads op mod kippladen (A).
5. Monter den store del af beslaget (F) på bærepladen med de 6 resterende skruer og skiver (G).
6. Sæt den nederste pasbolt (H) i aktuator (D) og beslag (F) og spænd låsemøtrik (I).
7. Skru motorstyringen (J) fast på den store del af beslaget (F) og spænd ledninger fast.
8. Tilslut strøm på batteriernes plus- og minuspol (K) forrest på bærepladen som vist. **Vigtigt:** +/- poler skal vendes korrekt. Hvis det monteres omvendt ødelægges motorstyringen.
9. Monter sædet og batteriafdækninger igen (se vejledning 106231 + 106235). Vip kippladen (A) helt fremover, for at få mere plads til at sætte den bagerste o-ring på de øverste afdækninger. Monter den ene o-ring bagerst på de to nederste afdækninger, inden de monteres op på de to øverste afdækninger.



Elektrisk kip/ Elektrisk tilt/ Electrical tilt - VELA Tango 700

VELA Tango 700

NORSK

Det anbefales at en VELA-tekniker utfører denne monteringen.

1. Demonter setet og batteridekselet (se veiledning 106231 + 106235).
2. Vipp vippeplaten (A) fremover for å få mer plass bak.
3. Fjern eksisterende setevinging ved å fjerne de 10 skruene og skivene (B).
4. Monter toppbeslaget (C) sammen med aktuatoren (D) som vist med 4 skruer og skiver (E) ovenfra. Topbeslaget (C) må vippes litt for å få det på plass mot vippeplaten (A).
5. Monter den store delen av beslaget (F) på bæreplaten med de 6 gjenværende skruene og skivene (G).
6. Sett den nederste passerbolten (H) i aktuatoren (D) og beslaget (F) og stram låsemutteren (I).
7. Skru motorstyringen (J) fast på den store delen av beslaget (F) og stram ledningene.
8. Koble strøm til batterienes pluss- og minuspol (K) foran på bæreplaten som vist. **Viktig:** +/- poler må vendes korrekt. Hvis de monteres omvendt, ødelegges motorstyringen.
9. Monter setet og batteridekslene igjen (se veiledning 106231 + 106235). Vipp vippeplaten (A) helt fremover for å få mer plass til å sette den bakre o-ringen på de øverste dekslene. Monter den ene o-ringen bak på de to nederste dekslene før de monteres på de to øverste dekslene.

SVENSKA

Det rekommenderas att en VELA-tekniker utför denna montering.

1. Demontera sätet och batteriluckorna (se instruktion 106231 + 106235).
2. Vippa vipplattan (A) framåt för att få mer utrymme bak.
3. Ta bort den befintliga sätesvippa genom att ta bort de 10 skruvarna och brickorna (B).
4. Montera toppfästet (C) tillsammans med aktuatoren (D) som visas med 4 skruvar och brickor (E) uppifrån. Toppfästet (C) måste vippas lite för att få det på plats mot vipplattan (A).
5. Montera den stora delen av fästet (F) på bärplattan med de 6 återstående skruvarna och brickorna (G).
6. Sätt den nedre passbulten (H) i aktuatorn (D) och fästet (F) och dra åt låsmuttern (I).
7. Skruva fast motorstyrningen (J) på den stora delen av fästet (F) och spänn fast kablarne.
8. Anslut ström till batteriernas plus- och minuspol (K) längst fram på bärplattan som visas. **Viktigt:** +/- polerna måste vändas korrekt. Om det monteras omvänt förstörs motorstyrningen.
9. Montera sätet och batteriluckorna igen (se instruktion 106231 + 106235). Vippa vipplattan (A) helt framåt för att få mer utrymme att sätta den bakre o-ringen på de övre luckorna. Montera den ena o-ringen bak på de två nedre luckorna innan de monteras på de två övre luckorna.

ENGLISH

It is recommended that a VELA technician performs this assembly.

1. Remove the seat and battery covers (see instructions 106231 + 106235).
2. Tilt the tilt plate (A) forward to gain more space at the back.
3. Remove the existing seat tilt by removing the 10 screws and washers (B).
4. Install the top bracket (C) together with the actuator (D) as shown with 4 screws and washers (E) from above. The top bracket (C) needs to be tilted slightly to fit it into place against the tilt plate (A).
5. Install the large part of the bracket (F) on the bearing plate with the remaining 6 screws and washers (G).
6. Insert the lower pivot bolt (H) into the actuator (D) and bracket (F) and tighten the locknut (I).
7. Secure the motor controller (J) to the large part of the bracket (F) and tighten the wires.
8. Connect the power to the battery's positive and negative terminals (K) at the front of the bearing plate as shown. **Important:** +/- poles must be correctly oriented. If mounted incorrectly, the motor controller will be damaged.
9. Reinstall the seat and battery covers (see instructions 106231 + 106235). Tilt the tilt plate (A) completely forward to gain more space to fit the rear o-ring on the upper covers. Attach one o-ring to the rear of the two lower covers before mounting them onto the two upper covers.