



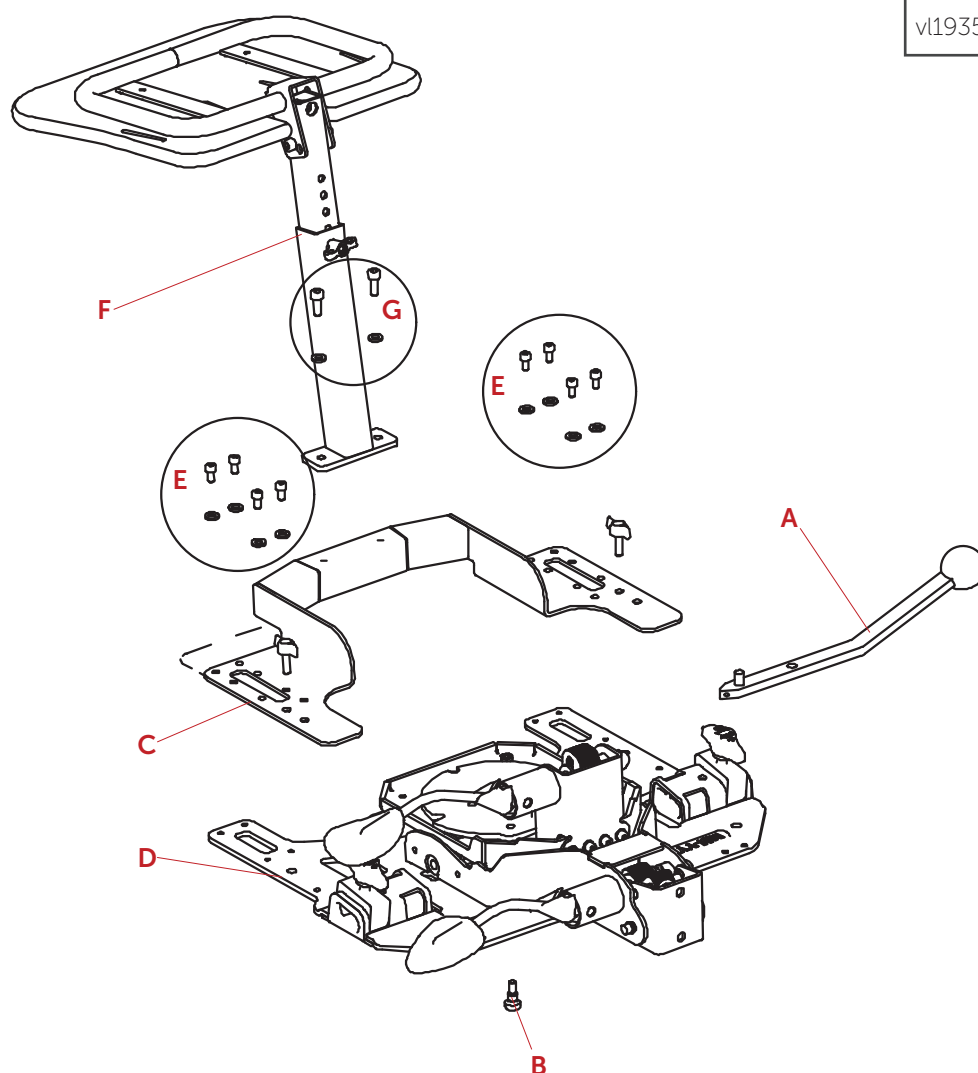

# S-fodstøtte / S-Footrest / Fotstøtte S-type - VELA Tango 700/700E

## Montagevejledning for S-fodstøtte Tango 700/700E

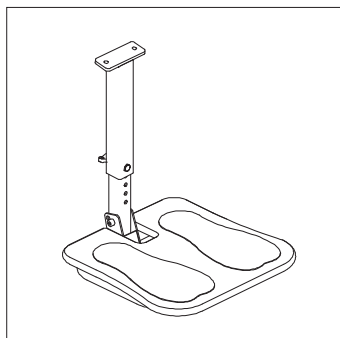

### DANSK

1. Afmonter sædet (se vejledning 106235)
2. Afmonter rotationshåndtag (A) og lås rotationen med skrue (B) fra rotationsgreb og fjern møtrik og fjeder (se vejledning 106247).  
**Bemærk:** Det er ikke muligt at bruge rotation, når der er monteret en S-fodstøtte på stolen.
3. Monter beslag for S-fodstøtte (C) på bæreplade (D) med de medfølgende skruer og skiver (E). Spænd godt fast. **Bemærk:** Beslag for S-fodstøtte kan flyttes 25mm fremad.
4. S-fodstøtten (F) monteres på beslaget (C) med de medfølgende skruer og skiver (G). Spænd godt fast.



# S-fodstøtte / S-Footrest / Fotstøtte S-type - VELA Tango 700/700E

## Montagevejledning for S-fodstøtte Tango 700/700E

### NORSK

1. Demonter setet (se veiledning 106235)
2. Demonter rotasjonshåndtaket (A) og lås rotasjonen med skruen (B) fra rotasjonshåndtaket og fjern mutter og fjær (se veiledning 106247).  
**Merk:** Det er ikke mulig å bruke rotasjon når en S-fotstøtte er montert på stolen.
3. Monter brakett for S-fotstøtte (C) på bæreplaten (D) med de medfølgende skruene og skivene (E). Stram godt til.  
**Merk:** Brakett for S-fotstøtte kan flyttes 25 mm fremover.
4. S-fotstøtten (F) monteres på brakett (G) med de medfølgende skruene og skivene (H). Stram godt til.

### SVENSKA

1. Montera bort sätet (se anvisning 106235)
2. Demontera rotationshandtaget (A) och lås rotationen med skruven (B) från rotationshandtaget och ta bort muttern och fjädern (se anvisning 106247).  
**Observera:** Det går inte att använda rotation när en S-fotstöd är monterad på stolen.
3. Montera fästet för S-fotstödet (C) på bärplattan (D) med de medföljande skruvarna och brickorna (E). Dra åt ordentligt. **Observera:** Fästet för S-fotstödet kan flyttas 25 mm framåt.
4. S-fotstödet (F) monteras på fästet (G) med de medföljande skruvarna och brickorna (H). Dra åt ordentligt.

### ENGLISH

1. Remove the seat (see instruction 106235)
2. Remove the rotation handle (A) and lock the rotation with the screw (B) from the rotation handle and remove the nut and spring (see instruction 106247).  
**Note:** It is not possible to use rotation when an S-footrest is mounted on the chair.
3. Mount the bracket for the S-footrest (C) on the support plate (D) with the included screws and washers (E). Tighten firmly. **Note:** The bracket for the S-footrest can be moved 25 mm forward.
4. The S-footrest (F) is mounted on the bracket (G) with the included screws and washers (H). Tighten firmly.