




El. bremsekit / El. brake kit / Bremsekit Elektrisk - VELA Tango 700

Montagevejledning for El. bremsekit på VELA Tango 700

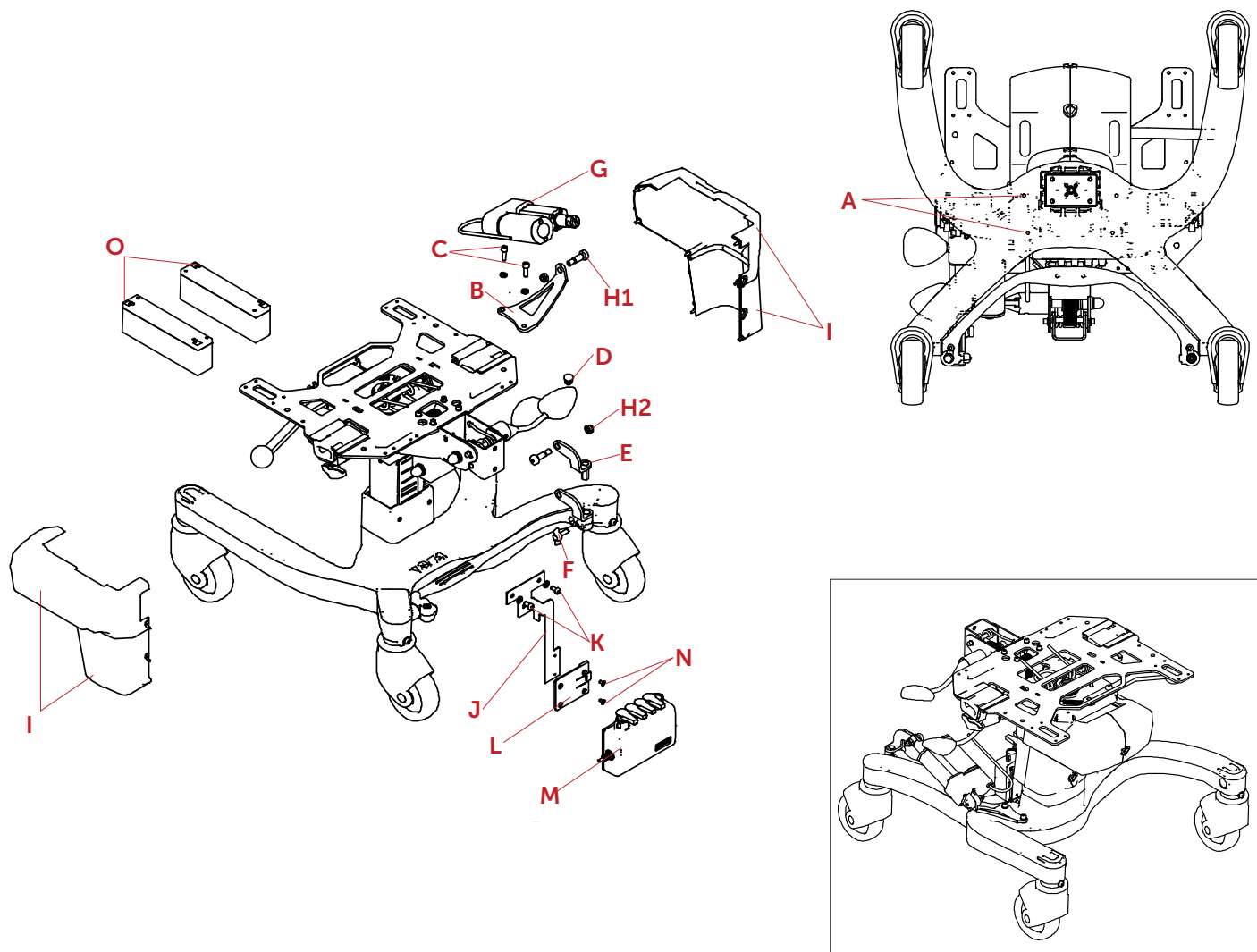

DANSK

Bremsen skal sidde på stolens højre side:

1. Bør to Ø5 huller nedfra i stellet for at kunne fiksere beslag. Der er allerede forberedt steder at bore i stellet (A). Skær M6 gevind.
2. Fikser beslag (B) med 2 x skruer og skiver (C) i de nye gevind (A).
3. Fjern eksisterende prop (D) og erstat med beslag (E). Fastpændes med vingskrue (F).
4. Monter aktuatoren (G) mellem de to beslag (B+E). Motoren skal vende ind mod stolen. Spænd med pasbolt og møtrik (H) i hver ende.
5. Fjern plastikafdækningerne (I) ved at pille o-ringene af og træk til siden (se vejledning 106231). Brug evt. en lille skruetrækker.
6. Monter beslag (J) for motorstyring med de samme skruer (K).
7. Monter plastikbeslaget (L) fra motorstyringen (M) på beslaget (J) med skruerne (N).
8. Skub motorstyringen (M) ind over plastikbeslaget (L), skub indtil den går i hak.
9. Forbind motorstyringen til strøm forrest på begge batterier (O). **Vigtigt:** +/- poler skal vendes korrekt. Hvis det monteres omvendt ødelægges motorstyringen.
10. Forbind både aktuator (G) og håndboks.
11. Monter afdækninger (I) med o-ringe igen (se vejledning 106231).



El. bremsekit / El. brake kit / Bremsekit

Elektrisk - VELA Tango 700

VELA Tango 700

NORSK

Bremsen skal sitte på stolens høyre side.

1. Bor to Ø5 huller nedenfra i u-stellet for å kunne fikse beslag. Det er allerede forbredt steder å bore i u-stellet (A). Bruk M6 gjengetapp for skrue.
2. Fikser beslag (B) med 2 x skruer og skiver (C) i hull (A).
3. Fjern eksisterende plugg (D) og erstatt med brakett (E). Fest med vingskrue (F).
4. Monter motor (G) mellom de to beslag (B+E). Motoren skal vende inn mot stolen. Spenn med bolt og mutter (H) i hver ende.
5. Fjern plastikkavdekningene (I) ved å ta o-ringene av og trekk dekslene til siden (se veiledning 106231).
6. Monter beslag (J) for motorstyring med de samme skruer (K).
7. Monter plastbeslaget (L) fra motorstyringen (M) på beslaget (J) med skruene (N).
8. Skyv motorstyringen (M) inn over plastbeslaget (L), skyv til det klikker på plass.
9. Koble motorstyringen til strøm foran på begge batterier (O). **Viktig:** +/- poler skal settes riktig vei. Hvis de monteres motsatt vei vil motorstyringen ødelegges.
10. Koble sammen motor (G) og håndkontroll.
11. Monter avdekninger (I) med o-ringe igen (se veiledning 106231).

SVENSKA

Bromsen ska sitta på stolens högra sida.

1. Borra två Ø5-hål från botten av ramen för att fixera beslag. Platser för borrhning i ramen (A) är redan förberedd. Klipp M6-trådar.
2. Fixerar fästet (B) med 2 x skruvar och brickor (C) i de nya gängorna (A).
3. Ta bort befintlig plugg (D) och ersätt med fäste (E). Fäst med vingskruv (F).
4. Montera ställdonet (G) mellan de två beslagen (B + E). Motorn måste vara vänd mot stolen. Dra åt med passbult och mutter (H) i varje ände.
5. Ta bort plasthöljet (I) genom att skala bort o-ringarna och dra åt sidan (se anvisning 106231). Använd vid behov en liten skruvmejsel.
6. Montera motorreglaget (J) med samma skruvar (K).
7. Montera plastfästet (L) från motorstyrningen (M) på fästet (J) med skruvarna (N).
8. Skjut motorstyrningen (M) över plastfästet (L), skjut tills det klickar på plats.
9. Anslut motorstyrenheten till framsidan av båda batterierna (O). **Viktigt:** +/- polerna måste vara korrekt orienterade. Motorstyrningen påverkas om den är inverterad.
10. Anslut både ställdon (G) och manuell låda.
11. Sätt tillbaka skydden (I) med o-ringar (se anvisning 106231).

ENGLISH

The brake should be on the right side of the chair.

1. Drill two Ø5 holes from the bottom of the frame to fixate the fittings. Spots to drill in the frame (A) are already marked. Cut M6 threads.
2. Fixate brackets (B) with 2 x screws and washers (C) in the new threads (A).
3. Remove existing plug (D) and replace with bracket (E). Fasten with wing screw (F).
4. Fit the actuator (G) between the two fittings (B+E). The motor must face the chair. Tighten with shoulder screw and nut (H) at each end.
5. Remove the plastic covers (I) by taking off the o-rings and pulling to the side (see instruction 106231). If necessary use a small screwdriver.
6. Install the brackets for motor control (J) with the same screws (K).
7. Mount the plastic bracket (L) from the motor controller (M) onto the bracket (J) with the screws (N).
8. Slide the motor controller (M) over the plastic bracket (L), push until it clicks into place.
9. Connect the motor control unit to the front on both batteries (O). **Important:** +/- poles must be correctly oriented. The motor control is damaged if it is installed inverted.
10. Connect the actuator (G) and the handbox.
11. Reinstall the covers (I) with the o-rings (see instruction 106231).