



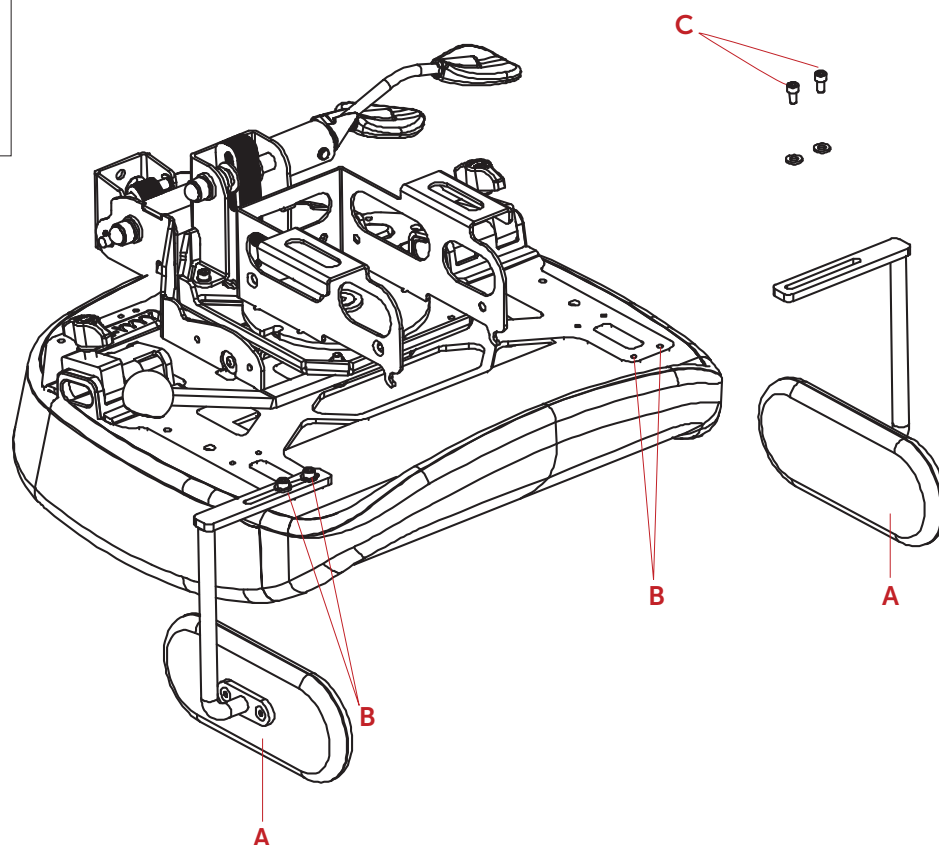

Lårstyr / Thigh support / Lårstøtte - VELA Tango 700E

Montagevejledning for lårstyr VELA Tango 700/700E

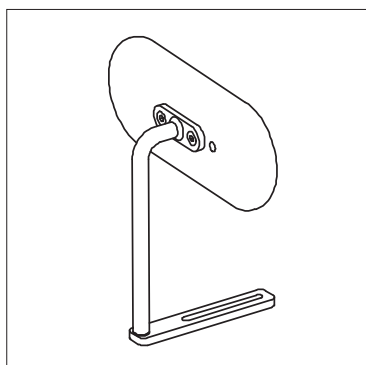

DANSK

1. Lårstyret (A) monteres i de to forreste huller (B) på sædepladen.
2. Indstil lårstyret (A) og spænd skruerne (C) godt til.

SVENSKA

1. Lårstyrningen (A) är monterad i de två främre hålen (B) på sittplattan.
2. Justera lårstyrningen (A) och dra åt skruvarna (C).

NORSK

1. Lårstøtte (A) monteres i de to fremste huller (B) på seteplaten.
2. Still inn lårstøtte (A) og spenn skruene (C) godt til.



ENGLISH

1. The thigh support (A) is mounted into the two frontmost holes (B) on the seatplate.
2. Adjust the thigh controlpad (A) and tighten the screws (C) well.



Lårstyr / Thigh support / Lårstøtte - VELA Tango 700

Montagevejledning for lårstyr VELA Tango 700/700E

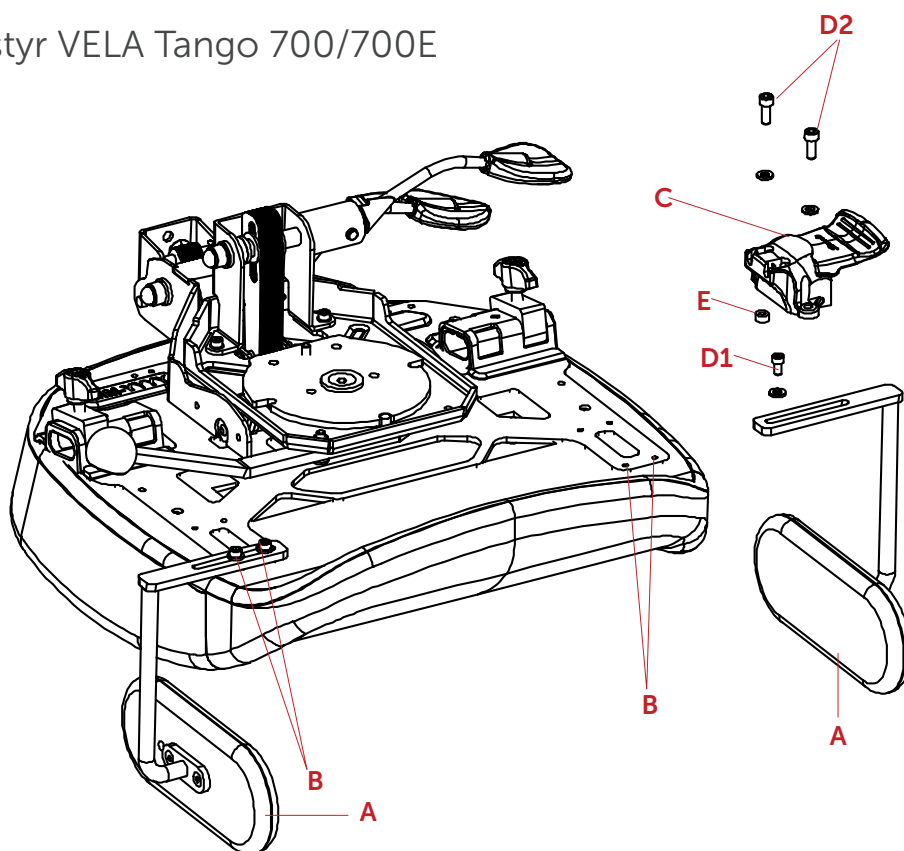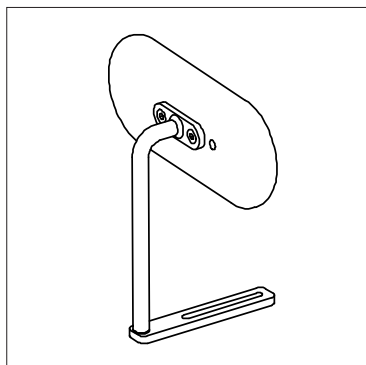

DANSK

1. Lårstyret (A) monteres i de to forreste huller (B) på sædepladen.
2. I siden med gasudløsergrebet (C), skrues dette først af og begge skruer kasseres.
3. Placer lårstyret over de to forreste huller (B). Skru lårstyret fast med den korte skrue (D1). Placer herefter udløsergrebet (C) ovenpå lårstyret og sæt afstandsstykke (E) ind under grebet for at kompensere for højdeforskel. Skru grebet fast med de to lange skruer og skiver (D2).
4. Indstil lårstyret (A) og spænd skruerne (D) godt til.

ENGLISH

1. The thigh support (A) is mounted into the two frontmost holes (B) on the seatplate.
2. On the side with the gas release handle (C), first unscrew this and discard both screws.
3. Place the thigh guide over the two front holes (B). Fasten the thigh guide with the short screw (D1). Then place the release handle (C) on top of the thigh guide and insert the spacer (E) under the handle to compensate for the height difference. Fasten the handle with the two long screws and washers (D2).
4. Adjust the thigh controlpad (A) and tighten the screws (D) well.

NORSK

1. Lårstøtte (A) monteres i de to fremste huller (B) på seteplaten.
2. På siden med gassutløserhåndtaket (C), skrues dette først av og begge skruer kasseres.
3. Plasser lårstyret over de to fremre hullene (B). Skru lårstyret fast med den korte skruen (D1). Plasser deretter utløserhåndtaket (C) oppå lårstyret og sett avstandsstykket (E) inn under håndtaket for å kompensere for høydeforskjell. Skru håndtaket fast med de to lange skruene og skivene (D2).
4. Still inn lårstøtte (A) og spenn skruene (D) godt til.

SVENSKA

1. Lårstyrningen (A) är monterad i de två främre hålen (B) på sittplattan.
2. På sidan med gasutlösarhåndtaget (C) skruvas detta först av och båda skruvarna kasseras.
3. Placera lårstyrningen över de två främre hålen (B). Skruva fast lårstyrningen med den korta skruven (D1). Placera sedan utlösarhåndtaget (C) ovanpå lårstyrningen och sätt distansen (E) under håndtaget för att kompensera för höjdskillnad. Skruva fast håndtaget med de två långa skruvarna och brickorna (D2).
4. Justera lårstyrningen (A) och dra åt skruvarna (D).