




Enkeltfodstøtte H/V / Single footrest / Fotstøtte enkel - VELA Tango, Uni2 stel

Montagevejledning - Enkeltfodstøtte på VELA Tango 600S & 700 med Uni2-stel

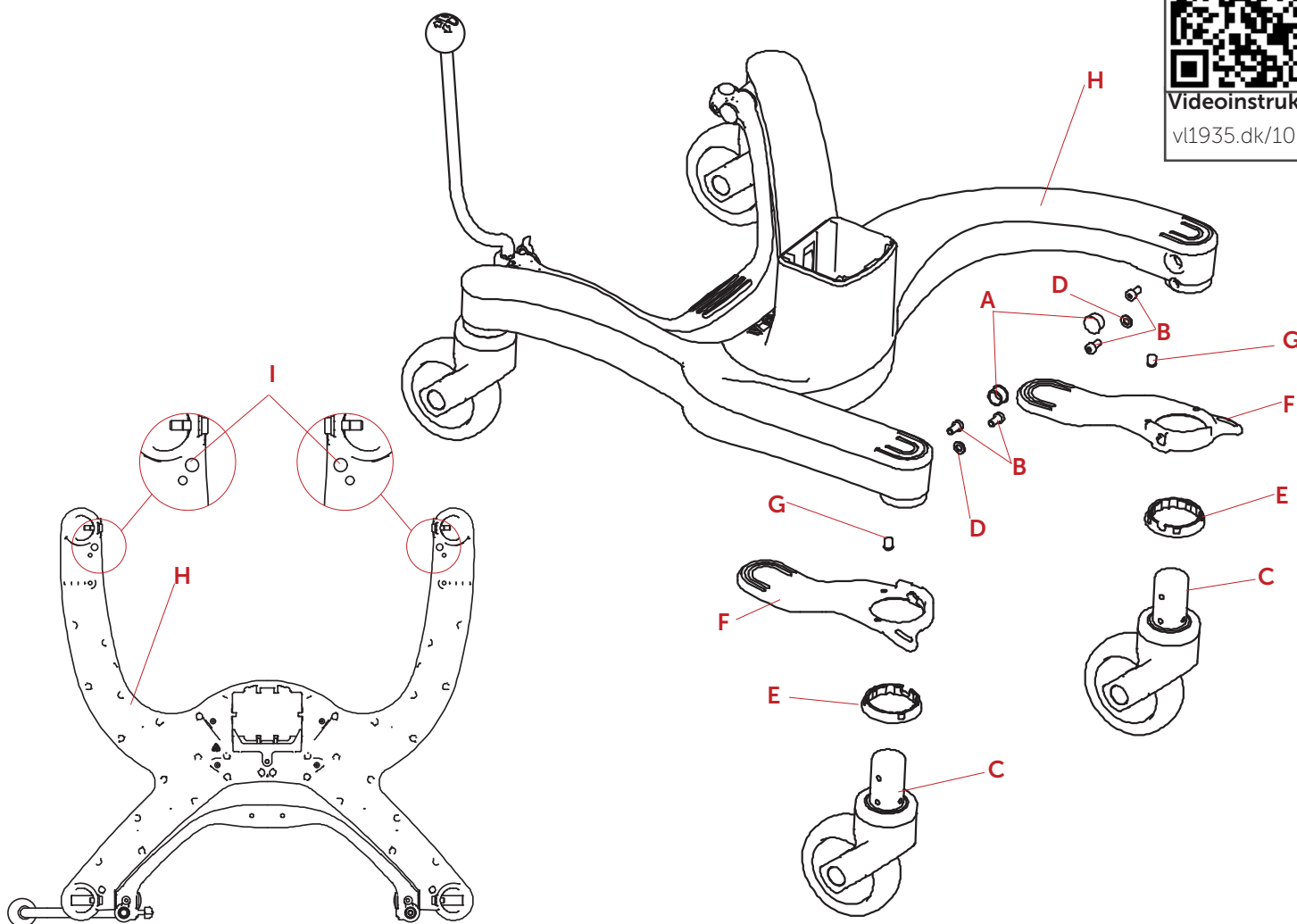

DANSK

1. Fjern plastprop (A)
2. Skru skruerne (B) ud af forhjulet (C), for at frigøre det.
3. Fjern skrue (B) og skive (D). Delene skal ikke bruges mere.
4. Placer plastbøsningen (E) i fodstøtten (F) nedefra, så hullerne til skruen passer sammen.
5. Placer trykstykke (G) i stellets (H) Ø8 hul (I).
6. Sæt fodstøtte (F) med plastbøsning (E) omkring stellet (H) og hold på plads, mens forhjulet (C) monteres igen.
7. Monter ny skrue (B) i forhjulet (C) igen, uden skive (D). Husk at dreje fodstøtte (F) og bøsning (E), så der er plads til skruen (B).

Bemærk: Fodstøtterne (F) har en højre og venstre udgave. Vend som på illustrationen.



Enkeltfodstøtte H/V / Single footrest / Fotstøtte enkel - VELA Tango, Uni2-stel

Montagevejledning - Enkeltfodstøtte på VELA Tango 600S & 700 med Uni2-stel

NORSK

1. Fjern plastproppen (A).
2. Skru ut skruene (B) fra forhjulet (C) for å løsne det.
3. Fjern skruen (B) og skiven (D). Delene skal ikke brukes igjen.
4. Plasser plastbøssingen (E) i fotstøtten (F) nedenfra, slik at skruehullene er på linje.
5. Plasser trykkstykket (G) i Ø8-hullet (I) på understellet (H).
6. Plasser fotstøtten (F) med plastbøssingen (E) rundt understellet (H), og hold den på plass mens forhjulet (C) monteres igjen.
7. Monter den nye skruen (B) i forhjulet (C), uten skiven (D). Husk å dreie fotstøtten (F) og bøssingen (E) slik at det er plass til skruen (B).

Merk: Fotstøttene (F) finnes i høyre- og venstreutførelse. Monter dem som vist på illustrasjonen.

SVENSKA

1. Ta bort plastpluggen (A).
2. Skruva ur skruvarna (B) från framhjulet (C) för att lossa det.
3. Ta bort skruven (B) och brickan (D). Delarna ska inte användas igen.
4. Placera plastbussningen (E) i fotstödet (F) underifrån så att skruvhålen linjerar.
5. Placera tryckstycket (G) i underredets (H) Ø8-hål (I).
6. Placera fotstödet (F) med plastbussningen (E) runt underredet (H) och håll det på plats medan framhjulet (C) monteras tillbaka.
7. Montera den nya skruven (B) i framhjulet (C), utan brickan (D). Kom ihåg att vrida fotstödet (F) och bussningen (E) så att det finns plats för skruven (B).

Obs! Fotstöden (F) finns i höger- och vänsterutförande. Montera dem enligt illustrationen.

ENGLISH

1. Remove the plastic cap (A).
2. Remove the screws (B) from the front caster (C) to release it.
3. Remove screw (B) and washer (D). These parts are no longer required.
4. Insert the plastic bushing (E) into the foot support (F) from below, aligning the screw holes.
5. Place the pressure piece (G) into the Ø8 hole (I) in the frame (H).
6. Position the foot support (F), with the plastic bushing (E), around the frame (H) and hold it in place while re-installing the front caster (C).
7. Install the new screw (B) in the front caster (C), without washer (D). Make sure to rotate the foot support (F) and bushing (E) so there is clearance for screw (B).

Note: The foot supports (F) are available in left- and right-hand versions. Install them as shown in the illustration.