



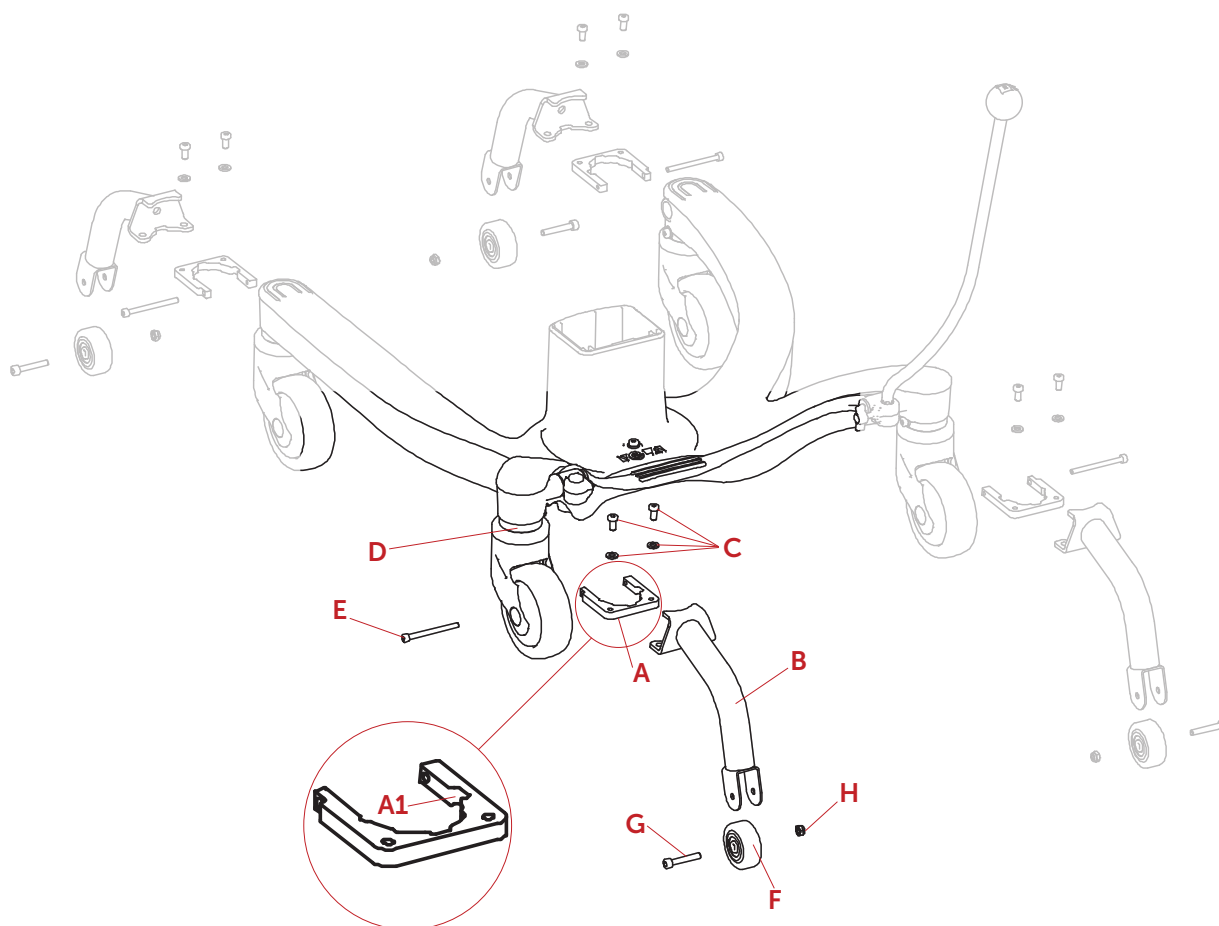

Antitiphjul / Anti-tiphjul / Anti-tip wheels - VELA Tango 600S/700, Uni2

Montagevejledning - Antitiphjul på VELA Tango 600S & 700 med Uni2-stel

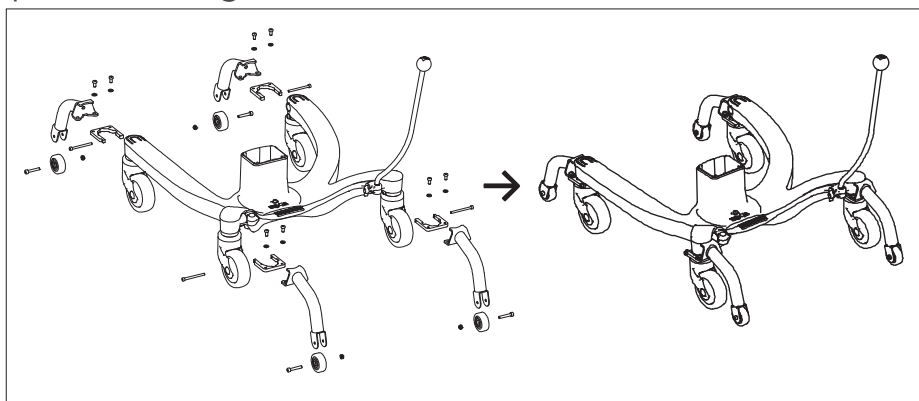

DANSK

1. Beslag (A) skrues på antitipbøjle (B) med de 2 skruer+skiver (C).
Bemærk: Hak til skruenhoved skal altid vende indad (A1), uanset om antitiphjul monteres foran eller bagpå stolen.
2. Beslag (A), med antitipbøjle (B) monteret, skubbes ind over hjulet (D).
3. Skru den lange skrue (E) gennem beslag (A) bag ved hjulet (D).
4. Placer antitiphjul (F) i antitipbøjlen (B) og skru det fast med skrue (G) og møtrik (H).
5. Gentag punkt 1-4 for montage i modsatte side/ved alle fire hjul.



Antitiphjul / Anti-tiphjul / Anti-tip wheels - VELA Tango 600S/700, Uni2

Montagevejledning - Antitiphjul på VELA Tango 600S & 700 med Uni2-stel

NORSK

1. Monter beslaget (A) på antitippbøylen (B) med de to skruene og skivene (C).
Merk: Utsparingen for skruhodet skal alltid vende innover (A1), uansett om antitipphjulene monteres foran eller bak på stolen.
2. Skyv beslaget (A), med antitippbøylen (B) montert, inn over hjulet (D).
3. Før den lange skruen (E) gjennom beslaget (A) bak hjulet (D).
4. Plasser antitipphjulet (F) i antitippbøylen (B) og fest det med skruen (G) og mutteren (H).
5. Gjenta trinn 1–4 på motsatt side / ved alle fire hjul.

SVENSKA

1. Montera fästet (A) på tippskyddsbågen (B) med de två skruvarna och brickorna (C).
Obs! Urtaget för skruvhuvudet ska alltid vara vänt inåt (A1), oavsett om tippskyddshjulen monteras fram eller bak på stolen.
2. Skjut fästet (A), med tippskyddsbågen (B) monterad, över hjulet (D).
3. För in den långa skruven (E) genom fästet (A) bakom hjulet (D).
4. Placera tippskyddshjulet (F) i tippskyddsbågen (B) och fäst det med skruven (G) och muttern (H).
5. Upprepa steg 1–4 på den andra sidan / vid samtliga fyra hjul.

ENGLISH

1. Attach bracket (A) to the anti-tip bar (B) using the two screws and washers (C).
Note: The recess for the screw head must always face inward (A1), regardless of whether the anti-tip wheels are installed at the front or rear of the chair.
2. Slide bracket (A), with the anti-tip bar (B) attached, over the wheel (D).
3. Insert the long screw (E) through bracket (A) behind the wheel (D).
4. Position the anti-tip wheel (F) in the anti-tip bar (B) and secure it with screw (G) and nut (H).
5. Repeat Steps 1–4 on the opposite side / for all four wheels.